

Español

Instrucción de uso: IFU-00018 -0010

Nº MS/ANVISA: 10396830037

ANVISA Nombre Técnico: Componentes para Ortodoncia

Nombre Comercial de la Familia ANVISA: BRACKETS, BANDAS Y TUBOS

Importante: Para consultar las Instrucciones de Uso, verifique la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código y acceda al archivo digital en www.morelli.com.br/IFU . Para obtener una Instrucción de Uso impresa, libre de costos de emisión y envío, comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente llamando al 0800 0121455 / 0800 7031455 o al correo electrónico sac@morelli.com.br . Para composiciones químicas solicitar la Ficha de Seguridad del Producto.



Fabricado por:


Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiaí, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ Código Postal: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsable técnico: Roger Morelli CREA-SP 5060214985

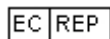

Representante Europeu


Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

Tel.: 351 21 4439292

Brackets Metálicos

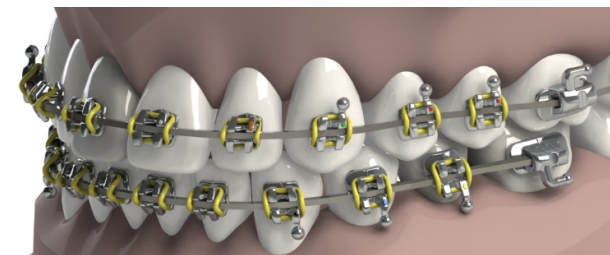

Pegado a la superficie bucal de los dientes, el bracket tiene como función principal alojar el arco intraoral, ambos determinan los esfuerzos transmitidos a los elementos dentarios, corrigiendo su posicionamiento durante el tratamiento dental.

Indicación de uso:

a) Clasificación de ángulos:

- Clase I
- Clase II
- Clase III

b) Problemas con dientes y huesos:

- Apiñamiento;
- Diastema;
- Mordida abierta;
- Mordida cruzada anterior;
- Mordida cruzada posterior;
- Mordida profunda;
- Prognatismo;
- Retrognatismo.

Indicación de paciente: todas las edades con indicación de tratamiento de ortodoncia.

Usuario previsto: uso e instalación por un profesional calificado.

Manejo:

Recomendamos el uso de “ **Pinzas de Ortodoncia** ” (ref. 75.01.022 o ref. 75.01.064).

Adhesión:

Utilice **Orthoprimer** y **Orthobond** para una unión eficaz.

Advertencia de adhesión:

Todos los productos destinados son chorreado y pasan por una descontaminación cuidadosa de las bases.

No toque las superficies de adhesión antes de aplicar la primer/adhesivo, ya que cualquier contacto puede provocar contaminación, causando fallas en la interfaz del adhesiva.

No utilice métodos de desinfección y esterilización en la base, ya que pueden contaminarlas o comprometerlas, causando un fallo del sistema de retención.

No chorrear, limpiar ni aplicar otro tipo de silano en la base de ninguna pieza, ya que el tratamiento superficial ideal ya se realiza durante la fabricación. Por lo tanto, sólo se debe aplicar Orthoprimer sobre el esmalte o base de la pieza antes de pegar.

En caso de contaminación en la base, descartar y substituir la pieza.

Proceder con el aislamiento adecuado en el momento del pegamento, evitando la contaminación por sangre o saliva.

Evite pegar el producto con interferencia en la oclusión para impedir que haya desgaste en la superficie dental o desprendimiento prematuro.

Se recomienda pegar un diente a la vez. La preparación de los dientes aumenta simultáneamente el riesgo de fracaso debido a la contaminación de la saliva, la fotopolimerización temprana de la imprimación en los dientes adyacentes, etc.

En el pegamento utilice siempre adhesivos ortodónticos, que promuevan mejor adhesión y facilitan la remoción del adhesivo residual del diente, preservando su esmalte. Las resinas no ortodónticas son más densas, penetran menos en la base de los brackets, son difíciles de remover y consumen más brocas.

Se recomienda aplicar una película mínima suficiente para cubrir la superficie del esmalte y la base de las piezas. Retire el exceso de Orthoprimer con un chorro de aire, en dirección gingival, evitando comprometer la zona de unión con la saliva. El exceso de orthoprimer compromete la unión y puede hacer que la pieza se salga de su posición hasta que se fotopolimerice.

La fotopolimerización previa de Orthoprimer compromete su adhesión al adhesivo.

Remoción:

Utilice una herramienta de extracción de brackets.

Contra indicaciones:

Morelli suministra los productos solo a profesionales calificados. Es responsabilidad exclusiva del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicadas para el tratamiento, tales como:

- Pacientes con deficiencia de higiene bucal.
- Pacientes que no pueden cooperar con el tratamiento.
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental.
- Alergia a cualquiera de los materiales de aparatos de ortodoncia.
- Enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia.
- Reabsorción radicular.
- Resorción ósea existente.
- Descalcificación existente en el esmalte dental.
- Uso en entorno de Resonancia Magnética.

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y/o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados. Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir:

- Daños en la mucosa oral y lengua;
- Dificultad para hablar o masticar;
- Decoloración de los dientes;
- Descalcificación;
- Reabsorción radicular;
- Complicaciones periodontales;
- Reacciones alérgicas;
- Dificultad en el mantenimiento de la higiene bucal;

- Dolor;
- Incomodidad;
- Sensibilidad.

Validez:

120meses.

Advertencias:

No tocar los brackets con puntas ultrasónicas: esto puede provocar fracturas y desprendimientos.

Orienta al paciente a NO MASTIGAR O MORDER ALIMENTOS DUROS durante el tratamiento ortodóntico, para evitar el desprendimiento prematuro.



La presencia de este producto puede producir un artefacto en la imagen en un examen de resonancia magnética en la región de la cabeza y/o el cuello. Puede ser necesaria cierta manipulación de los parámetros de exploración para compensar el artefacto o eliminarlo, según lo determine el profesional sanitario, el laboratorio o el hospital.



Este producto contiene níquel y cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, orienta al paciente a buscar un médico.



Producto no reutilizable, ya que su reutilización puede provocar infecciones cruzadas, disminución de la eficacia del pegado y pérdida de propiedades mecánicas por desgaste natural.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

No utilice el producto si la embalaje está dañada o abierto, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles falsificación de productos.

Cabe al profesional cualificado orientar a sus pacientes del riesgo de aspiración y deglución en la hipótesis de quiebra/desprendimiento de las piezas, no debe subestimar las posibles complicaciones inmediatas o tardías derivadas de ese tipo de accidentes y precisa informar adecuadamente al paciente y/o sus responsables legales sobre los riesgos inherentes al acontecimiento y las conductas a tomar.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa bacteriana y tártaro o enfermedades como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Códigos:

Slot .018" = 0.46 mm / Slot .022" = 0.56 mm

¹ Organismo de Certificación

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.10.100	Roth	11	-	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.101	Roth	-	21	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.102	Roth	12	-	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.103	Roth	-	22	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.104	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.105	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.108	Roth	15 14	24 25	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.112	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.113	Roth	-	-	-	33	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.114	Roth	-	-	-	34 44	3,2mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.116	Roth	-	-	-	35 45	3,2mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.120	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.121	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.126	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.127	Roth	-	-	-	33	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.200	Roth	11	-	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.201	Roth	-	21	-	-	3,9mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.202	Roth	12	-	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.203	Roth	-	22	-	-	2,9mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.204	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.205	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.206	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.207	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.208	Roth	15 14	24 25	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.212	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.213	Roth	-	-	-	33	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.214	Roth	-	-	-	34 44	3,2mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.216	Roth	-	-	-	35 45	3,2mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.220	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.221	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.222	Roth	13	-	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.223	Roth	-	23	-	-	3,2mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.224	Roth	15 14	-	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.225	Roth	-	24 25	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.226	Roth	-	-	-	43	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.227	Roth	-	-	-	33	3,2mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.228	Roth	-	-	-	44	3,2mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.10.229	Roth	-	-	-	34	3,2mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.230	Roth	-	-	-	45	3,2mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.231	Roth	-	-	-	35	3,2mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.300	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.301	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.302	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.303	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.304	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.305	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.308	Roth	15 14	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.310	Roth	-	-	-	31 32	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.312	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.313	Roth	-	-	-	33	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.314	Roth	-	-	-	34 44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.316	Roth	-	-	-	35 45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.320	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.321	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.324	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.325	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.326	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.327	Roth	-	-	-	33	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.328	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.329	Roth	-	-	-	34	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.330	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.331	Roth	-	-	-	35	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.10.400	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.401	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.402	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.403	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.404	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.405	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.406	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.407	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.408	Roth	15 14	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.410	Roth	-	-	-	31 32	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.412	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.413	Roth	-	-	-	33	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.10.414	Roth	-	-	34	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.416	Roth	-	-	35	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.420	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.421	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.422	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.423	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.424	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.425	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.426	Roth	-	-	-	43	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.427	Roth	-	-	33	-	2,7mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.428	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.429	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.430	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.431	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.432	Roth	-	-	-	42	2,2mm	+10° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.433	Roth	-	-	32	-	2,2mm	+10° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.434	Roth	11	-	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.435	Roth	-	21	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.436	Roth	12	-	-	-	2,5mm	0° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.437	Roth	-	22	-	-	2,5mm	0° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.438	Roth	-	-	31 32	42 41	2,2mm	+10° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.10.900	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.10.901	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.906	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.10.907	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.911	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.915	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.920	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.950	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.10.951	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.953	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.960	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.10.961	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.963	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.969	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.971	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.978	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.10.979	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.981	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.996	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.10.997	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.200	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.201	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.202	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.203	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.204	Roth	13	-	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.205	Roth	-	23	-	-	2,7mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.206	Roth	15 14	-	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.207	Roth	-	24 25	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.208	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.210	Roth	-	-	-	43	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.211	Roth	-	-	33	-	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.212	Roth	-	-	-	44	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.213	Roth	-	-	34	-	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.214	Roth	-	-	-	45	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.215	Roth	0	-	35	-	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.300	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.301	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.302	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.303	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.305	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.307	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.309	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.311	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.313	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.315	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.316	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.318	Roth	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.320	Roth	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.322	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.324	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.326	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.328	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.15.400	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.15.401	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.402	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.403	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.405	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.407	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+13° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.409	Roth	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.411	Roth	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.413	Roth	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.415	Roth	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.416	Roth	-	-	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.418	Roth	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.420	Roth	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.422	Roth	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.424	Roth	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.426	Roth	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.428	Roth	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.501	Roth	11	-	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.502	Roth	-	21	-	-	3,2mm	+12° TORQ.	+5° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.503	Roth	12	-	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.504	Roth	-	22	-	-	2,5mm	+8° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.505	Roth	13	-	-	-	2,6mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.506	Roth	-	23	-	-	2,6mm	-2° TORQ.	+9° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.509	Roth	15 14	-	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.510	Roth	-	24 25	-	-	2,5mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.511	Roth	-	-	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.512	Roth	-	-	-	43	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.513	Roth	-	-	33	-	2,6mm	-11° TORQ.	+7° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.514	Roth	-	-	-	44	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.515	Roth	-	-	34	-	2,5mm	-17° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.516	Roth	-	-	-	45	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.517	Roth	-	-	35	-	2,5mm	-22° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.15.723	Roth	-	-	-	-	-	-	-	.022"	-	-
10.15.725	Roth	-	-	-	-	-	-	-	.022"	-	-
10.15.901	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.902	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.15.903	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.904	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.15.905	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.906	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.922	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.15.923	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.924	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.15.925	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.930	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018", .022"	C E	2797
10.15.932	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.15.933	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.15.934	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.15.935	Roth	13	23	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.19.101	Capellozza	11	-	-	-	3,2mm	+7° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.102	Capellozza	-	21	-	-	3,2mm	+7° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.103	Capellozza	12	-	-	-	2,5mm	+3° TORQ.	9° ANG.	.022"	-	-
10.19.104	Capellozza	-	22	-	-	2,5mm	+3° TORQ.	9° ANG.	.022"	-	-
10.19.105	Capellozza	13	-	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	8° ANG.	.022"	-	-
10.19.106	Capellozza	-	23	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	8° ANG.	.022"	-	-
10.19.107	Capellozza	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.108	Capellozza	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.109	Capellozza	-	-	-	42 41	2,3mm	-1° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.110	Capellozza	-	-	31 32	-	2,3mm	-1° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.111	Capellozza	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.112	Capellozza	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.113	Capellozza	-	-	-	44	2,9mm	-17° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.114	Capellozza	-	-	34	-	2,9mm	-17° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.115	Capellozza	-	-	-	45	2,9mm	-22° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.116	Capellozza	-	-	35	-	2,9mm	-22° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.117	Capellozza	13	-	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.118	Capellozza	-	23	-	-	2,9mm	-5° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.119	Capellozza	-	-	-	42 41	2,3mm	+4° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.120	Capellozza	-	-	31 32	-	2,3mm	+4° TORQ.	2° ANG.	.022"	-	-
10.19.121	Capellozza	11	-	-	-	3,2mm	+14° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.122	Capellozza	-	21	-	-	3,2mm	+14° TORQ.	5° ANG.	.022"	-	-
10.19.123	Capellozza	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	9° ANG.	.022"	-	-
10.19.124	Capellozza	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	9° ANG.	.022"	-	-
10.19.125	Capellozza	13	-	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	11° ANG.	.022"	-	-
10.19.126	Capellozza	-	23	-	-	2,9mm	-2° TORQ.	11° ANG.	.022"	-	-

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.19.127	Capellozza	-	-	31 32	42 41	2,3mm	-6° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.128	Capellozza	-	-	-	43	2,9mm	-11° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.129	Capellozza	-	-	33	-	2,9mm	-11° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.19.904	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	ANG.	.022"	-	-
10.19.905	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	ANG.	.022"	-	-
10.19.906	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	ANG.	.022"	-	-
10.19.934	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	ANG.	.022"	-	-
10.19.935	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	ANG.	.022"	-	-
10.19.936	Capellozza	-	-	-	-	-	TORQ.	ANG.	.022"	-	-
10.25.101	Ricketts	11	-	-	-	3,2mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.102	Ricketts	-	21	-	-	3,2mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.103	Ricketts	12	-	-	-	2,5mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.104	Ricketts	-	22	-	-	2,5mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.105	Ricketts	13	-	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.106	Ricketts	-	23	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.107	Ricketts	14	-	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.108	Ricketts	-	24	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.109	Ricketts	15	-	35	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.110	Ricketts	-	25	-	45	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.111	Ricketts	-	-	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.113	Ricketts	-	-	-	43	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.114	Ricketts	-	-	33	-	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.115	Ricketts	-	-	-	45 44	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.116	Ricketts	-	-	34 35	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.119	Ricketts	13	-	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.120	Ricketts	-	23	-	-	2,7mm	+7° TORQ.	+8° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.121	Ricketts	-	-	-	43	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.122	Ricketts	-	-	33	-	2,7mm	+7° TORQ.	+2° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.123	Ricketts	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.124	Ricketts	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.125	Ricketts	15	-	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.126	Ricketts	-	25	-	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.301	Ricketts	11	-	-	-	3,0mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.302	Ricketts	-	21	-	-	3,0mm	+22° TORQ.	+3° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.303	Ricketts	12	-	-	-	2,2mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.304	Ricketts	-	22	-	-	2,2mm	+14° TORQ.	+10° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.305	Ricketts	13	-	-	-	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.25.306	Ricketts	-	23	-	-	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.307	Ricketts	-	-	-	43	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.308	Ricketts	-	-	33	-	2,5mm	+7° TORQ.	+5° ANG.	.018"	C E	2797
10.25.900	Ricketts	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.25.901	Ricketts	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.25.905	Ricketts	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.30.101	Edgewise	11	21	-	-	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.102	Edgewise, Ricketts	12 11	21 22	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.103	Edgewise	-	-	31 32	42 41	1,8mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.104	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.105	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.106	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.107	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.108	Edgewise	16	26	36	46	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.111	Edgewise, Ricketts	15 14 13	-	33 34 35	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.112	Edgewise, Ricketts	-	23 24 25	-	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.30.201	Edgewise	11	21	-	-	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.202	Edgewise, Ricketts	11 12	22 21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.203	Edgewise	-	-	31 32	42 41	1,8mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.205	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.206	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.207	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.208	Edgewise, Ricketts	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.209	Edgewise, Ricketts	12	22	31 32	42 41	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.210	Edgewise	16	26	36	46	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.211	Edgewise, Ricketts	13 14 15	-	33 34 35	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.212	Edgewise, Ricketts	-	23 24 25	-	45 44 43	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.30.900	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.30.901	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.31.201	Edgewise	11	21	-	-	3,4mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.31.206	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,6mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.31.207	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,3mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.001	M.B.T.	11	-	-	-	3,9mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.002	M.B.T.	-	21	-	-	3,9mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.003	M.B.T.	12	-	-	-	2,9mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.004	M.B.T.	-	22	-	-	2,9mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.005	M.B.T.	13	-	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.35.006	M.B.T.	-	23	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.007	M.B.T.	15 14	24 25	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.011	M.B.T.	-	-	-	43	3,2mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.012	M.B.T.	-	-	33	-	3,2mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.013	M.B.T.	-	-	-	44	3,2mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.014	M.B.T.	-	-	34	-	3,2mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.015	M.B.T.	-	-	-	45	3,2mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.016	M.B.T.	-	-	35	-	3,2mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.017	M.B.T.	13	-	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.018	M.B.T.	-	23	-	-	3,2mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.019	M.B.T.	-	-	-	43	3,2mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.020	M.B.T.	-	-	33	-	3,2mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.025	M.B.T.	13	-	-	-	2,7mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.026	M.B.T.	-	23	-	-	2,7mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.028	M.B.T.	-	-	-	43	2,7mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.029	M.B.T.	-	-	33	-	2,7mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.030	M.B.T.	13	-	-	-	2,7mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.031	M.B.T.	-	23	-	-	2,7mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.032	M.B.T.	-	-	-	43	2,7mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.033	M.B.T.	-	-	33	-	2,7mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.034	M.B.T.	15 14	-	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.035	M.B.T.	-	24 25	-	-	3,2mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.036	M.B.T.	-	-	-	44	3,2mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.037	M.B.T.	-	-	34	-	3,2mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.038	M.B.T.	-	-	-	45	3,2mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.039	M.B.T.	-	-	35	-	3,2mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.101	M.B.T.	11	-	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.102	M.B.T.	-	21	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.103	M.B.T.	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.104	M.B.T.	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.105	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.106	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.107	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.108	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.109	M.B.T.	15 14	-	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.110	M.B.T.	-	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.111	M.B.T.	-	-	31 32	42 41	2,3mm	-6° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.35.112	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.113	M.B.T.	-	-	33	-	2,9mm	-6° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.114	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.115	M.B.T.	-	-	33	-	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.116	M.B.T.	-	-	-	44	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.117	M.B.T.	-	-	34	-	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.118	M.B.T.	-	-	-	45	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.119	M.B.T.	-	-	35	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	C E	2797
10.35.401	M.B.T.	11	-	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.018"	-	-
10.35.402	M.B.T.	-	21	-	-	3,2mm	+17° TORQ.	+4° ANG.	.018"	-	-
10.35.403	M.B.T.	12	-	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.018"	-	-
10.35.404	M.B.T.	-	22	-	-	2,5mm	+10° TORQ.	+8° ANG.	.018"	-	-
10.35.412	M.B.T.	15 14	24 25	-	-	2,9mm	-7° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.35.413	M.B.T.	-	-	-	44	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.35.414	M.B.T.	-	-	34	-	2,9mm	-12° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.35.415	M.B.T.	-	-	-	45	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.35.416	M.B.T.	-	-	35	-	2,9mm	-17° TORQ.	+2° ANG.	.022"	-	-
10.35.417	M.B.T.	13	-	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	-	-
10.35.418	M.B.T.	-	23	-	-	2,9mm	0° TORQ.	+8° ANG.	.022"	-	-
10.35.419	M.B.T.	-	-	31 32	42 41	2,3mm	-6° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.35.420	M.B.T.	-	-	-	43	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	-	-
10.35.421	M.B.T.	0° ANG.	-	33	-	2,9mm	0° TORQ.	+3° ANG.	.022"	-	-
10.35.901	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.902	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.903	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.904	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.905	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.906	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.924	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.018" / .022"	-	-
10.35.935	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.35.936	M.B.T.	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.40.201	Rossi	15 14 13 12 11	21 22 23 24 25	31 32 33 34 35	45 44 43 42 41	1,8mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	-	-
10.65.101	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.103	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.104	Edgewise	15 14 13	-	33 34 35	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.105	Edgewise	-	23 24 25	-	43 44 45	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.106	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797

Código	Prescripción	SD	SE	IE	ID	Comp	Torque	Ángulo	Slot	CE	Org'
10.65.201	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.203	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.204	Edgewise	13	-	33	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.205	Edgewise	-	23	-	43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.206	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.301	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.302	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.303	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.304	Edgewise	13	-	33	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.305	Edgewise	-	23	-	43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.401	Edgewise	11	21	-	-	3,0mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.402	Edgewise	12	22	31 32	42 41	2,2mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.403	Edgewise	15 14 13	23 24 25	33 34 35	45 44 43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.404	Edgewise	13	-	33	-	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.405	Edgewise	-	23	-	43	2,5mm	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.900	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.65.901	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.65.902	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.018"	C E	2797
10.65.903	Edgewise	-	-	-	-	-	-	-	.022"	C E	2797
10.65.904	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.905	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.906	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.907	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.934	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.935	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797
10.65.936	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.018"	C E	2797
10.65.937	Edgewise	-	-	-	-	-	0° TORQ.	0° ANG.	.022"	C E	2797

Revisión	Cambios
0	Elaboración y disponibilidad en el portal Morelli.
1	Revisión de contraindicaciones, efectos secundarios, advertencias e inclusión de Orthobond Plus.
2	Revisión de declaración de collage.
3	Inclusión de piezas MBT Light HP y revisión del instructivo para la obtención del instructivo digital y la tabla de simbología.
4	Revisión de advertencias sobre el uso de productos en un entorno de resonancia magnética, inclusión de la contraindicación y revisión de la advertencia.
5	Revisión de la información de los componentes.
6	Revisión de la máscara, eliminación de la composición, informar la referencia de la versión técnica de la prescripción Capellozza.
7	Inclusión de nuevos códigos de producto, actualización de mascarillas, avisos y ajuste de idioma.
8	Ajustes de advertencia.
9	Adición de advertencia: No tocar los brackets con puntas ultrasónicas: puede causar fracturas y desprendimientos.
10	Revisión de collage y advertencias.